



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ирригатор для полости рта Nicefeel

200мл FC159



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Описание устройства	4
2.1 Комплектация	5
3. Работа с устройством	5
3.1 Подготовка к работе	5
3.2 Использование.....	5
4. Чистка зубов.....	6
5. После использования	7
6. Обслуживание аккумулятора	7
7. Распространенные неисправности и их устранение	8
8. Примечание	8

1. Меры предосторожности

Чтобы уменьшить риск повреждения пользователя ирригатора от электрического шока и продлить срок службы ирригатора, соблюдайте следующую технику безопасности:

1. Не трогайте зарядку и заряжающийся ирригатор мокрыми руками.
2. Не погружайте ирригатор в воду или иную жидкость.
3. Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.
4. Не размещайте и не храните ирригатор в местах, где он может упасть в ванну, раковину или душевой слив.
5. Не трогайте прибор, упавший в воду. Сначала отключите устройство от сети. Отправьте в авторизованный сервисный центр, чтобы специалисты оценили, можно ли продолжать пользоваться этим аппаратом.
6. Проверяйте провод зарядного устройства перед первым использованием и в дальнейшем.
7. Не подключайте устройство к сети с характеристиками тока, отличающимися от указанных в технических характеристиках прибора.
8. Не используйте ирригатор, если поврежден шнур или вилка зарядки, если они работают некорректно или были погружены в воду или иную жидкость.
9. Не направляйте поток воды под язык, в нос, во внутреннее ухо или гениталии. Давление, которое производит поток воды, выходящий из ирригатора, может вызвать серьезное повреждение указанных областей.
10. Используйте аппарат в строгом соответствии с приведенной инструкцией и рекомендациями вашего лечащего врача.
11. Заполняйте резервуар только водой или специальными стоматологическими растворами.
12. Следите за тем, чтобы никакие инородные предметы не попадали внутрь устройства.
13. Храните и используйте зарядное устройство с проводом вдали от источников избыточного тепла.
14. Не используйте устройство, где использовался кислородный или аэрозольный баллон.
15. Не используйте ополаскиватели полости рта, которые содержат йод, отбеливатели или масло чайного дерева.
16. Перед использованием ирригатора снимите все украшения, которые находятся в ротовой полости: пирсинги, виниры, грилзы и так далее.

17. Если ваш лечащий врач рекомендует вам использовать премедикацию на основе антибиотиков перед любыми стоматологическими процедурами, проконсультируйтесь у него или у дантиста перед использованиями данного ирригатора или любого другого средства для гигиены ротовой полости.
18. Предназначено только для использования в помещении. Не используйте на улице.
19. Использование ирригатора детьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья возможно только под присмотром.
20. Не разрешайте детям играть с устройством.

2. Описание устройства



2.1 Комплектация

1. Ирригатор;
2. Две сменные насадки;
3. Зарядное устройство.

3. Работа с устройством


3.1 Подготовка к работе

1. Обязательно перед первым использованием ирригатора полностью зарядите его, с помощью адаптера, который идет в комплекте. Обратите внимание, что устройство запрещено использовать пока оно заряжается.
2. Наденьте выбранную вами насадку на ирригатор до щелчка.
3. Откройте отверстие для воды на боковой стороне устройства. Наполните контейнер водой. Перед заполнением контейнера убедитесь, что устройство выключено.
4. Чтобы сменить насадку на аппарате, просто нажмите кнопку «Отсоединение» и потяните щетку вверх.


3.2 Использование

1. Данное устройство сохраняет в памяти выбранный режим и возвращается к нему, когда вы вновь включите ирригатор.
2. Переключение между стандартным, деликатным и массажным режимами может производиться как в выключенном, так и во включенном состоянии.
3. Вне зависимости от режима, в котором работает устройство, оно отключится автоматически через 120 секунд после начала работы.
4. Если массажный режим используется более чем 3 секунды, будет показан оставшийся заряд батареи.
5. Пока ирригатор заряжается, индикаторы мигают. Когда батарея полностью заряжена, а ирригатор подключен к сети, индикаторы горят ровным светом, не мигают.
6. Обратите внимание, что устройство запрещено использовать пока оно заряжается.
7. Поворачивайте наконечник ирригатора, чтобы изменить направление потока воды.

4. Чистка зубов

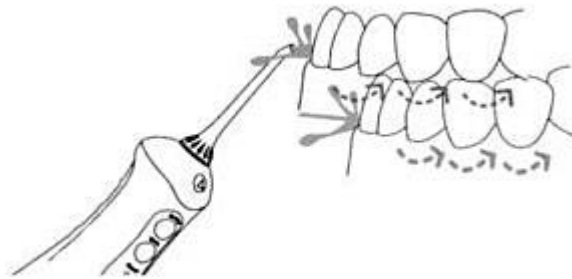


Удерживая устройство под наклоном вниз, поместите наконечник струи в рот и направьте наконечник на зубы перед включением устройства.

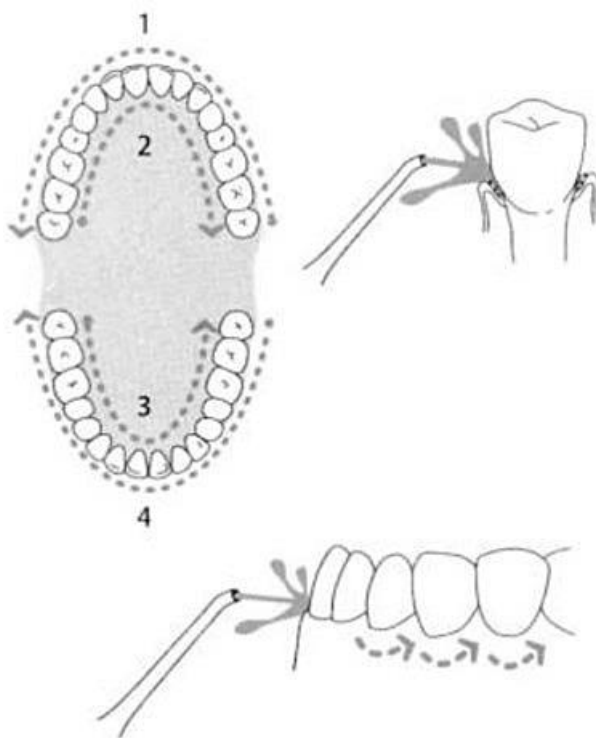


Когда поток воды и десны перпендикулярны друг другу, слегка закройте рот, чтобы избежать разбрызгивания воды и добиться наилучших результатов чистки.

Пожалуйста, сначала сожмите челюсть (задние зубы) и начните чистить резцы. Проведите струей воды по деснам, а также остановитесь между зубами, пока придесневая область и промежутки между зубами не будут полностью очищены.

5. После использования

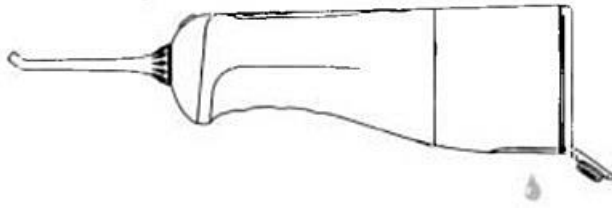

1. Выключите ирригатор.
2. Откройте отверстие для воды на боковой панели ирригатора и слейте жидкость.

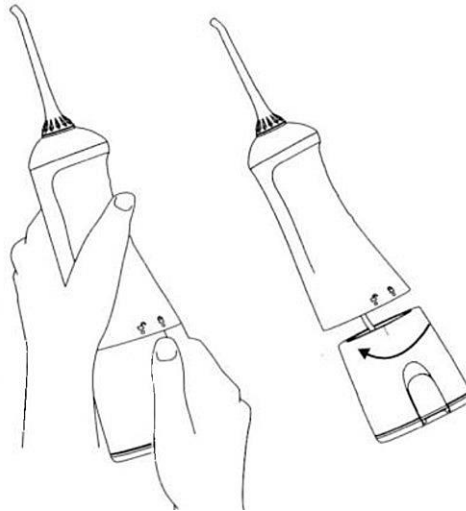

3. Возьмитесь за ирригатор обеими руками, как показано на рисунке выше.
4. Поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы снять и просушить контейнер.

6. Обслуживание аккумулятора

- Перед первым использованием полностью зарядите ирригатор в течение 4 часов.
- Перед тем как убирать устройство на хранение, полностью зарядите его заранее.
- Чтобы увеличить срок службы батареи, заряжайте устройство заранее.
- Утилизируйте литиевую батарею отдельно от бытового мусора. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местным экологическим законодательством.

7. Распространенные неисправности и их устранение

Проблема	Причина	Решение
Протекает вода между наконечником и корпусом ирригатора	Кольцевой уплотнитель поврежден, и насадка не может быть надета правильно	Свяжитесь с ритейлером для ремонта и установите насадку правильно
Контейнер для воды протекает	Слабый кольцевой уплотнитель	Снимите и закрепите контейнер заново
Слабое давление	Ирригатор разряжен	Зарядите устройство
Устройство не включается	Ирригатор разряжен	Зарядите устройство
Устройство не подает воду	Фильтр забит	Очистите фильтр
Контейнер для воды мокрый	Вода выходит через воздухозаборное отверстие	Стандартное явление для режимов с высоким давлением

Если описанные выше методы не помогают, свяжитесь с сервисным центром для того, чтобы он осуществил ремонт.

8. Примечание

1. Во время первоначального использования выберите «щадящий режим» (gentle), чтобы избежать кровоточивости десен из-за недостаточной адаптации к использованию.

Адаптация наступает после постоянного использования в течение около двух недель. Если кровотечение чрезмерное или кровотечение продолжается после двух недель использования, может возникнуть хроническое воспаление десен.

В таком случае производитель рекомендует приостановить использование ирригатора и обратиться за профессиональным стоматологическим лечением.

2. Не рекомендуется использовать это устройство детям или взрослым людям с зубными имплантатами, язвами или открытыми ранами в ротовой полости.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**